

Power Tower View – Komplette Praxisversorgung auf minimaler Stellfläche.



Power Tower View – Für jede Anforderung die passende Lösung

Druckluft und Absaugung auf minimaler Stellfläche vereint.

Der kompakte und leise Power Tower View lässt sich innerhalb der Praxisräumlichkeiten flexibel auf einer Fläche von nur 0,4 m² aufstellen. Dadurch sparen Sie im Vergleich zur Installation von Einzelgeräten wertvollen Platz – ein Vorteil bei den heutigen Mietkosten. Auch sonst passt er perfekt in jede Praxis – durch sein hochwertiges Design und seine geringe Lautstärke dank Schallschutzdämmung. Damit kann der Aufstellort in der Praxis frei gewählt werden. Dank vieler individueller Konfigurationsmöglichkeiten ist der Power Tower View eine flexible Lösung die mit der Praxis mitwächst und sich problemlos neuen Gegebenheiten anpasst.



Oben die Druckluft, unten die Absaugung

Oben schlägt das Herz der Praxis: Hier sorgt der leistungsstarke langlebige Kompressor zuverlässig für ölfreie, trockene und hygienische Druckluft. Die Luftqualität unserer Kompressoren im Power Tower View entspricht den Vorgaben der neuen ISO 22052 für dentale Druckluft. Die effektiven Dürr Dental Saugsysteme in der trockenen oder nassen Variante für die kontinuierliche, ergonomische und infektionssgeschützte Behandlung befinden sich unten. Darüber hinaus ist der Power Tower View als Medizinprodukt der Klasse IIa nach MDR (EU 2017/745) zertifiziert.



Darauf kommt es an:

- Komplette Praxisversorgung auf minimaler Stellfläche durch kompaktes, modernes und ansprechendes Design für eine optische Aufwertung der Praxisräume
- Erhöhung der Betriebssicherheit durch frühzeitige Warnmeldungen und automatische Wartungserinnerungen (Perfekt gewartete Geräte, schnelle Fehlerbehebung, Fernwartung)
- Bedarfsgerechte Kompressor-Steuerung bietet einen redundanten Betrieb
- Komfortables Anpassen der Geräteeinstellungen an die Praxisgegebenheiten
- Angenehmes Geräusch von max. 56 dB(A) dank Schallkapselung
- Dank variabler Konfigurationsmöglichkeiten das passende Gerät für jede Praxis
- Anwenderfreundliche und komfortable Bedienung des Geräts



Eine Lösung mit der Option auf mehr

Das modulare Konzept des Power Tower Views bietet flexible Möglichkeiten zur Auf- und Umrüstung. Beispielsweise können Sie ein zusätzliches Kompressor Aggregat nachrüsten, um die Leistung zu steigern oder Redundanz für erhöhte Betriebssicherheit zu schaffen.

Einer für alles – alles in Einem

Der Power Tower View kombiniert das Kompressor Aggregat, den Drucklufttank, die Saugmaschine, die Membran-Trocknungsanlage und bei Bedarf auch den Amalgamabscheider thermisch und physikalisch einwandfrei in einer kompakten Einheit. Das modulare Konzept erfüllt zahlreiche individuelle Wünsche und erlaubt Konfigurationen für bis zu 4 Behandler. Damit steht für jede Praxisgröße eine passende Lösung zur Verfügung.

Alles entspannt im Blick – mit VistaSoft Monitor



Unsere Software bindet die Versorgungstechnik in das Netzwerk der Praxis ein. Damit ist der aktuelle Status der überwachten Systeme immer im Blick. Auch über anstehende Wartungsaufgaben wie z. B. den Filterwechsel am Kompressor oder wenn der Amalgambehälter einen Füllstand von 95 % erreicht hat wird die Praxis automatisch informiert. Im Störfall zeigt die Software, ob Sie den Fehler selbst beheben können oder bietet die Möglichkeit, direkt per Mail den Techniker zu informieren. Dieser kann über eine Fernwartungsfunktion unmittelbar nach einer Lösung suchen.



Scan me



Technische Daten auf einen Blick

	VS 600	VS 900 S	VS 900 S	VS 1200 S	V 600	V 900 S	V 1200 S
Anzahl Behandler	2	3	3	4	2	3	4
Kompressor	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo
2. Aggregat (optional)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amalgamabscheider (optional)	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Fördermenge* bei 5 bar [l/min] mit 1 Aggregat	115	115	115	115	115	115	115
Fördermenge* bei 5 bar [l/min] mit 2 Aggregaten	230	230	230	230	230	230	230
Schallpegel [dB(A)] bei 35° C Umgebungstemperatur	56	56	56	56	56	56	56
Spannung (V)	230	230	400	400	230	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Größe (H x B x T cm)	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61
Gewicht (kg)	275	275	275	275	265	265	265

* Fördermenge gemessen ohne Trockenluft



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '21
WINNER

Zubehör




Website Filterfinder Übersicht: <https://www.duerrdental.com/produkte/druckluft/material-zubehoer/filterauswahl/>



Ansaugfilter für
Kompressor-Aggregate



Bakterienfilter für
Membran-
Trocknungsanlage

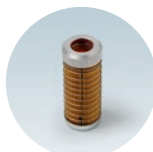

Feinfilter für Membran-
Trocknungsanlage



Koaleszenzfilter für
Membran-Trocknungs-
anlage

DÜRR DENTAL SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com



Scan me

**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM